

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN NP/800

INSTRUCCIONES



BOMBA DE ASPIRACIÓN



KIT DE APÓSITO (espuma / tubo / película)



CANISTER

1. Prepare el kit.



Confirme que el kit esté completo.

2. Conecte el tubo



Conecte las dos uniones del tubo del apósito a los dos juntas del canister como se muestra en la figura.

3. Instale el Canister



Inserte el recipiente de forma oblicua en la base derecha de la unidad principal.

4. Confirme Instalación



Tire suavemente del tubo para confirmar que el tubo y el canister son conectados de forma fiable.

5. Conecte el adaptador de corriente



Enchufe el cable de alimentación de CA en la entrada de CA del adaptador.

6. Conecta el dispositivo



Conecte la CC del adaptador de corriente a la unidad principal.

7. Puesta en marcha



Toque la tecla de encendido, seleccione el modo, ajuste la presión e iniciar la terapia.

8. Retire el canister




Presione el botón en la parte superior derecha lado de la unidad principal para quitar el canister.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN NP/800


➤ CONECTE EL TUBO DE LA BOMBA PERISTÁLTICA

1. Retire el tubo atascado dispositivo.

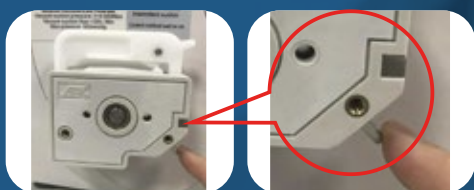

Presione el cabezal de la bomba peristáltica. Suelte el botón y retire el dispositivo del tubo atascado.

2. Instale el tubo de la bomba peristáltica

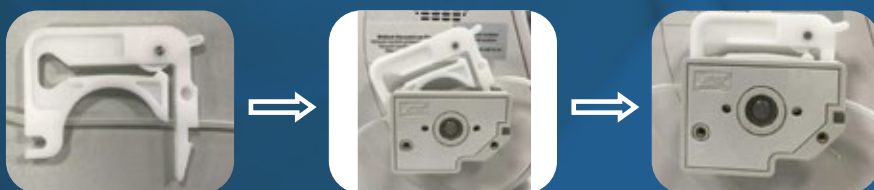

- Instale el tubo de la bomba peristáltica como se muestra.
- Instale el dispositivo de tubo atascado hasta que escuche un sonido de "clic".
- Ajuste la tensión del cierre de la abrazadera del tubo de la bomba peristáltica, de abajo hacia arriba debe ajustarse a la tercera posición de la tarjeta es lo mejor.

➤ ATENCIÓN

- Para garantizar una presión negativa eficaz, el producto debe utilizarse durante 72hrs seguidas. Si el tratamiento se interrumpe dentro de este tiempo o se cierra por mas de 2 horas, el kit se debe cambiar por completo.
- La terapia de las heridas se controla con regularidad y el apósito de la herida debe cambiarse con frecuencia. Si tiene cualquier signo de una infección sistémica, debe comunicarse con su médico tratante.
- Cuando el sistema está funcionando, el apósito de espuma es un sistema cerrado y debe evitar romper la película.
- Si se encuentran fugas de aire, verifique que la unidad principal, el recipiente, la conexión del conducto, la ventosa y el tapón estén bien sellados.
- Consulte las instrucciones de la unidad principal.

➤ GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

- Si ocurre la "presión baja" (LPA), revise el apósito y el tubo para ver si hay fugas y reinicie la máquina si es necesario.
 - Si se produce la "presión alta" (HPA), compruebe si el tubo está doblado y reinicie la máquina si es necesario.
 - Si se produce el "canister lleno" (FULL), el recipiente está lleno y es necesario reemplazar otro recipiente nuevo. Refiriéndose a la Figura 8, presione el botón de bloqueo y el canister de la aspiradora saldrá suavemente, sosteniendo el canister de vacío con la otra mano.
 - Si aparece el mensaje "Batería baja", la batería interna recargable no es suficiente. Debe cargar la fuente de alimentación externa o utilice una fuente de alimentación externa.
- + Esta guía no sustituye al manual del producto.
+ Antes de utilizar este equipo, el operador debe leer y comprender detenidamente el contenido del manual del producto.
+ Este equipo debe ser operado por profesionales médicos autorizados y ningún otro personal debe usarlo.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE USARLO.